

ASSISTEP

TREPPENASSISTENT



“ Seit ich den AssiStep habe, fürchte ich mich nicht mehr, die Treppe zu gehen.

- Oddbjørn (68), nutzt AssiStep seit 2016

Bleiben Sie aktiv und selbstständig

Für viele kann die Treppe eine Herausforderung oder Barriere im Alltag werden, jedoch ist die Treppe auch ein effektives Werkzeug, um sich weiterhin physisch aktiv und in Bewegung zu halten.

Die Folgen eines Treppensturzes können schwerwiegend sein, und viele weigern sich daher Treppen zu gehen, besonders Alleinstehende. Jedes Jahr werden rund 600.000 Menschen in Deutschland aufgrund von Treppenstürzen medizinisch versorgt.

AssiStep ist ein mechanisches Produkt ohne Verwendung von Elektrizität. Es besteht aus einem Handlauf und einem Griff, der entlang des Handlaufs geschoben wird. Bei Schwindel oder Instabilität der Beine unterstützt der Handgriff, bis die nächste Stufe sicher betreten werden kann. AssiStep bietet die extra Stütze und Sicherheit, die benötigt wird, um weiterhin die Treppe ohne Unterstützung nutzen zu können.





Ein Handgriff – viele Möglichkeiten

AssiStep wird entsprechend der Körpergröße sowie des Bedarfs des Nutzers installiert. Der Handgriff von AssiStep ist ergonomisch geformt, bietet zwei Griffhöhen und kann problemlos mit dem Handlauf von AssiStep kombiniert werden. So findet sich für jeden Nutzer die passende Position zum Greifen.

Testen Sie es und finden Sie Ihren Favoriten:



- 1 Eine Hand:**
 AssiStep kann problemlos mit einer Hand benutzt werden, entweder mit links oder rechts, sowohl aufwärts als auch abwärts.



- 2 Kombinieren Sie Handgriff und Handlauf:**
 Benutzen Sie den Handlauf für mehr Stütze und Sicherheit, wenn Sie den Handgriff vor sich herschieben, sowohl auf- als auch abwärts.



- 3 Greifen Sie den vertikalen Teil des Handgriffs:**
 Beim Heruntergehen der Treppe bevorzugen es einige, den vertikalen Teil des Handgriffs zu nutzen.



Für Groß und Klein

Mittlerweile wird AssiStep von Nutzern jeden Alters, Krankheit und/oder Verletzung benutzt. Darunter befinden sich unter anderem Senioren, Kinder, Schlaganfallpatienten, Personen mit Verletzungen, neurologischen Krankheiten und Nutzer mit langwierigen Krebserkrankungen. Alle Nutzer haben eines gemeinsam: Sie benötigen etwas Unterstützung und Sicherheit, um weiterhin selbstständig Treppensteigen zu können.

“ Es gibt viele, die Schwierigkeiten beim Treppengehen haben und die von AssiStep profitieren können. Treppensteigen kann nicht nur die Gehfunktion aufrecht erhalten, sondern eignet sich auch gut als Training.

- Zitat Martin Tjügen, Zeitschrift Ergotherapeuten, Februar 2017

Mit AssiStep wird die Treppe nicht mehr dafür ausschlaggebend sein, wo und wie man wohnen soll. Dies kann man nun selbst bestimmen. AssiStep ist über die Rüdiger Schmitt Treppenlifte GmbH erhältlich. Kontaktieren Sie uns gerne bezüglich Zuschussmöglichkeiten, finanzieller Unterstützung sowie Absetzbarkeit. Wir unterstützen Sie gerne, sodass AssiStep auch für Sie einen Teil Ihres Alltags werden kann.



Effektives Treppentraining

AssiStep wird u. a. von medizinischen Einrichtungen und Rehasentren benutzt. Der Handgriff von ASSISTEP kann beim Gangtraining hinter dem Anwender hergeschoben werden, wenn dieser eigenständig Treppen läuft. Somit verhindert AssiStep die Sturzgefahr. Mit AssiStep kann man das Treppentraining früher beginnen und Sturzsicherheit erlangen. So kann man sich besser darauf konzentrieren, den Anwender auf der Treppe anzuleiten und zu unterstützen.

Treppentraining ist auch zu Hause möglich. Menschen, die nach einem Sturz oder einer Verletzung trainieren, können mit AssiStep mehr Aktivität und Training in ihren Alltag bringen. AssiStep wurde u. a. bei vielen Schlaganfallpatienten installiert, sodass diese früher mit dem Treppensteigen beginnen können und nicht von Pflegepersonal abhängig sind, um sich in ihrem eigenen Zuhause frei bewegen zu können.

“ Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, da ich nicht passiviert werde.

- Guttorm (95), nutzt AssiStep seit 2017




Gehen Sie Ihre Treppe täglich
2 Mal für ein Jahr
besteigen Sie Zugspitze




In Skandinavien
entwickelt und produziert


Erhältlich für:

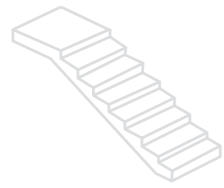

Gerade Treppen

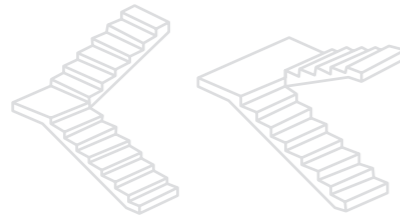

L & U-Treppen mit einem oder mehreren Podesten

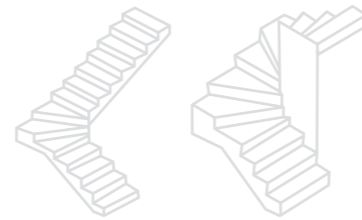

L & L & U-Kurventreppen (ohne Podest)

Produktspezifikationen:



Kann AssiStep auf meiner Treppe installiert werden?

AssiStep kann einfach an die meisten Treppen angepasst werden, unabhängig vom Winkel, des Wandmaterials oder dem oberen und unteren Ende der Treppe. Da AssiStep aus Modulen, die wir auf Lager haben, zusammengebaut wird, ist die Lieferzeit nach der Bestellung kurz. Sie sollen nicht lange darauf warten müssen, sicher Treppensteigen zu können!

Die Lieferung beinhaltet einen regulären und robusten Handlauf, welcher einfach an der Wand montiert wird.

Der Handlauf steht nur 10 cm von der Wand ab und der eingeklappte Handgriff gerade einmal 18 cm. Daher bedarf es keiner Baugenehmigung oder großen Eingriff in Ihrem Zuhause, um AssiStep zu installieren. AssiStep ist nur für den Innengebrauch geeignet. Unten sehen Sie Installationsbeispiele des AssiSteps und mögliche Lösungen für verschiedene Treppen, Wände und Platz am oberen und unteren Ende der Treppe, die man in den meisten Heimen in Deutschland findet.

Zusätzliche Funktionalität

Der Handgriff kann bei Nichtgebrauch problemlos eingeklappt werden. Auf diese Weise nimmt AssiStep keinen Platz auf der Treppe ein und ist für andere, die die Treppe nutzen, nicht im Weg. Dies geschieht durch Drücken des orangefarbenen Knopfes und das gleichzeitige Drücken der äußeren Seite des Handgriffs nach oben. Der Handgriff kann aus Sicherheitsgründen nur aufwärts eingeklappt werden. Beim Ausklappen des Handgriffs rastet AssiStep automatisch ein und ist umgehend zum Gebrauch

bereit. Möchten Sie eine Tasche oder Einkaufstasche zwischen den Etagen transportieren, kann man diese einfach am AssiStep befestigen. So können Sie sich darauf konzentrieren, sicher die Treppe zu gehen. AssiStep hat an beiden Seiten einen Haken, sodass man, sowohl beim Herauf- als auch beim Herabgehen der Treppe, Dinge transportieren kann.

Die Haken gehören nicht zur Grundausstattung und müssen separat angefragt werden.





Kontaktinformationen Hersteller:

www.assistep.com

kontakt@assistep.de

+47 995 60 130

Assitech AS
Fossegrenda 30B
7038 Trondheim
Norwegen